

MANUEL D'UTILISATION
MATELAS DE MASSAGE
RELAXANT & CHAUFFANT



Lisez attentivement
ce mode d'emploi avant
d'utiliser le produit et
conservez-le pour un usage ultérieur

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

INTRODUCTION DE SECURITE

- **Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition de recevoir une supervision ou des consignes concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et de comprendre les risques qu'il présente. Il est interdit de laisser les enfants jouer avec l'appareil. Il est interdit de laisser aux enfants le soin de procéder au nettoyage et à l'entretien de l'appareil sans supervision.**
- **Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.**
- **Ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.**
- Ne réparez pas l'appareil vous-même. Contactez plutôt un technicien qualifié. Pour éviter toute mise en danger, ne faites remplacer le câble défectueux que par un câble équivalent et que par le fabricant, son service après-vente ou toute personne de qualification similaire.
- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
- Veiller à absolument éviter tout contact de l'appareil de massage, de l'interrupteur et du câble avec de l'eau,

de la vapeur ou d'autres liquides. Pour cette raison, uniquement utiliser l'appareil dans des locaux secs (par ex. jamais dans la baignoire ou un sauna). Ne jamais tenter de rattraper un appareil tombé dans l'eau. Débrancher immédiatement le bloc d'alimentation de la prise de courant.

- N'utilisez pas le cordon pour un usage autre que l'usage prévu, par exemple pour porter l'appareil, le suspendre ou débrancher la prise. Ne pas pincer, plier ou tordre le câble. Tenir l'appareil et le câble à l'écart de la chaleur, de l'huile et des arêtes coupantes. Si le cordon est endommagé ou sectionné, ne le touchez pas, débranchez immédiatement la prise. Un câble tordu ou endommagé augmente les risques d'électrocution.
- Ne piquez pas d'épingles, d'aiguilles ni d'objets pointus dans l'appareil.
- N'utilisez jamais l'appareil pendant un orage.
- Utilisez l'appareil uniquement avec le bloc secteur fourni et à la tension secteur spécifiée sur l'appareil.
- Ne pas soumettre l'appareil à des chocs, ni le laisser chuter. Avant chaque utilisation, contrôlez soigneusement l'appareil afin de détecter s'il présente des signes d'usure et / ou d'endommagement. En cas de constat d'usure ou de dommage, ou si l'appareil a été utilisé de manière incorrecte, ne pas faire fonctionner l'appareil et immédiatement l'éteindre en cas de panne ou de défaillance. Ramenez l'appareil au commerçant avant de le réutiliser.
- Ne pas recouvrir l'appareil pendant l'utilisation (coussin, couverture, etc.). Ne jamais utiliser l'appareil à

proximité d'essence ou d'autres substances aisément inflammables.

- Le cas échéant, consultez votre médecin et le fabricant de votre stimulateur cardiaque avant d'utiliser cet appareil. Sous certaines circonstances, les champs électriques et magnétiques émis par cet appareil peuvent affecter le fonctionnement de votre stimulateur cardiaque.
- Si vous portez un stimulateur cardiaque, ne pas utiliser l'appareil de massage dans la région du cœur.
- Les enfants ou personnes manquant de connaissances ou d'expérience dans la manipulation de l'appareil, ou limitées dans leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales, ne doivent pas utiliser cet appareil sauf sous la surveillance ou la direction d'une personne responsable pour leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas utiliser cet appareil sur des enfants en bas âge, des personnes handicapées ou insensibles à la chaleur (par ex. diabétiques, modifications de la peau dues à une maladie ou zones de peau cicatrisées dans la région d'application), ni des animaux. Ne pas utiliser l'appareil pendant la grossesse, après la prise d'antalgiques ou d'alcool.
- Veillez à ne pas vous endormir tant que l'appareil est en service.
- Ne pas utiliser l'appareil
 - * en cas d'hernie discale ou de plaies ouvertes,
 - * dans une voiture,
 - * en cas d'activités au cours desquelles une

* réaction imprévue peut s'avérer dangereuse.

- **RISQUE DE BÛLURES !** La surface de l'appareil est chaude lors du fonctionnement. Les personnes insensibles à la chaleur doivent appliquer la vigilance requise lors de l'usage.
- Ne pas utiliser l'appareil sur des parties et régions de la peau ou du corps enflées, brûlées, infectées, malades ou lésées. En cas de doute, consultez un médecin avant l'utilisation, surtout dans les cas suivants :
 - * maladie grave ou opération récente dans le haut du corps,
 - * port de stimulateur cardiaque, implant ou autre moyen thérapeutique,
 - * thromboses,
 - * douleurs d'origine indéterminée.
- Cet appareil a été conçu exclusivement pour des massages du dos des utilisateurs. Il ne peut en aucun cas remplacer un traitement médical.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé sur le visage (par ex. les yeux), sur la glotte, les pieds ou d'autres parties sensibles du corps.
- Confier les réparations à des spécialistes ou à un atelier agréé par le fabricant uniquement. Des réparations inadéquates peuvent engendrer des dangers et risques importants pour l'utilisateur.
- **AVERTISSEMENT !** Si le cordon secteur de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant de l'appareil ou le S.A.V. afin d'éviter toutes mises en danger.

Données techniques :


Adaptateur secteur : 100-240 V~, 50/60 Hz

Puissance : 12 W

Poids : environ 1,38 kg

Dimensions du produit : 167x57x2.5 cm

Aperçu de l'appareil

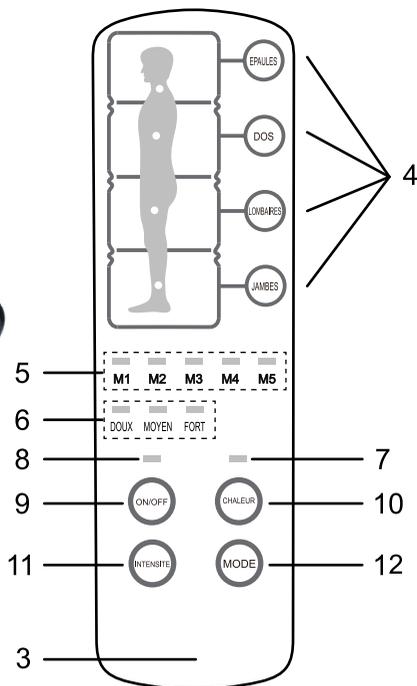

1. Tapis de massage

2. Pochette pour la manette

3. Manette

4. Boutons pour les zones de massage

5. Témoin de mode

6. Témoin d'intensité

7. Témoin de chaleur

8. Témoin de fonctionnement

9. Bouton ON/OFF

10. Bouton de chaleur

11. Boutons de sélection de l'intensité

12. Bouton de mode

Utilisation

Avant la mise en service

1. Dépliez l'appareil et fixez le tapis de massage à une chaise à l'aide de sangles élastiques ou placez-le sur un canapé, un lit, etc.

2. Branchez le câble de l'adaptateur sur le câble correspondant du tapis de massage.

3. Branchez l'adaptateur domestique sur une prise de courant de 100-240 V.

4. Allumez l'appareil à l'aide de la manette (voir les instructions de la manette ci-dessous).

5. Lorsque vous avez terminé, placez la manette dans la pochette située sur le côté du tapis de massage.

Mise en service / utilisation

Remarque : lors de sa première utilisation, l'appareil peut dégager une odeur de plastique qui disparaît rapidement.

Remarque : l'appareil s'éteint automatiquement après 30 minutes. Ne pas utiliser l'appareil plus de 30 minutes au maximum. Une stimulation excessive due à un massage plus long peut causer des contractions musculaires.

Branchez la fiche dans la prise de courant. Posez le câble de manière à ce que personne ne puisse trébucher dessus.

Mise en marche et arrêt :

Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton ON/OFF.

Après l'utilisation, éteindre l'appareil sur le bouton ON/OFF.

Remarque : lors de la sélection de la zone à masser, la programmation de l'extinction automatique de l'appareil est activée automatiquement et est réglée sur 30 minutes par défaut.

Zone de massage

Pendant l'utilisation, en appuyant les boutons de zone de massage vous pouvez démarrer ou éteindre les zones de massage. Lorsque la zone de massage est en fonction, le témoin correspondant s'allume.

Fonction de réglage de la chaleur :

Appuyez sur le bouton de pour activer la fonction de chauffage de l'appareil.

Appuyez à nouveau sur le bouton de chaleur, pour désactiver la fonction de chauffage de l'appareil.

Mode et intensité

Appuyez sur le bouton de sélection de l'intensité, pour régler l'intensité des vibrations.

Il existe plusieurs modes de massage par vibration. Appuyez sur le bouton mode pour changer de mode.

Nettoyage et entretien

Remarque : Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.

- Nettoyez uniquement avec une éponge douce et légèrement humide.
- Ne laissez jamais l'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec l'appareil.
- N'utilisez que des produits de nettoyage doux. N'utilisez pas d'essence, de nettoyeur pour fenêtres, de nettoyeur pour vitres, d'encaustique pour meubles ou de diluant pour peinture.
- Conservez l'appareil dans un endroit propre et sec.
- Éviter les températures élevées et la lumière directe du soleil.

Cet appareil est conforme aux directives CE appropriées et a été fabriqué selon les règles techniques de sécurité les plus récentes.



Recyclage

Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2012/19/EU afin de pouvoir être soit recyclé soit démantelé dans le but de réduire tout impact sur l'environnement.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

Ne pas jeter des appareils électriques avec les déchets municipaux non triés. Utiliser des équipements de collecte séparés. Contacter votre gouvernement local pour toute information concernant les systèmes de collecte disponibles.

Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.



Importé par

FORTUS

28 Bis rue du Goulet,
93300 Aubervilliers, France
www.yoghi.fr